



# STERIS処置具カタログ

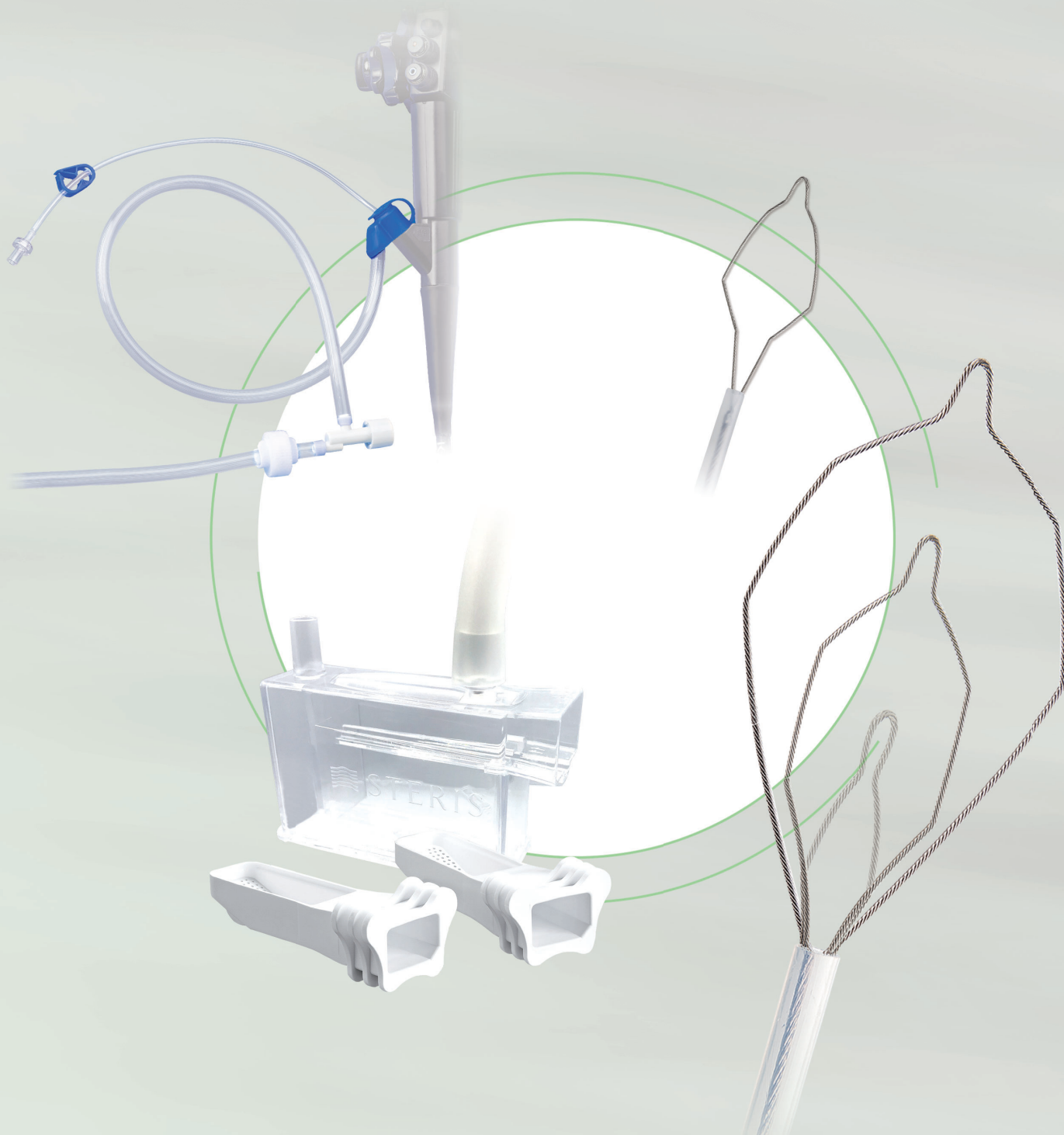


# エグザクト コールドスネア Exacto® Cold Snare

## コールドポリペクトミー専用のスネア

ポリープを確実に捉え、高周波焼灼電源装置を使用せず、シャープに切除する独自のスネアデザインが特徴

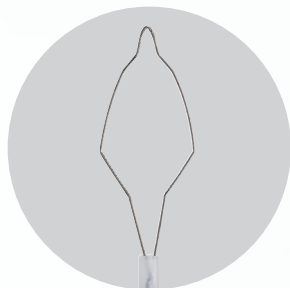

独自の菱形  
スネアデザイン

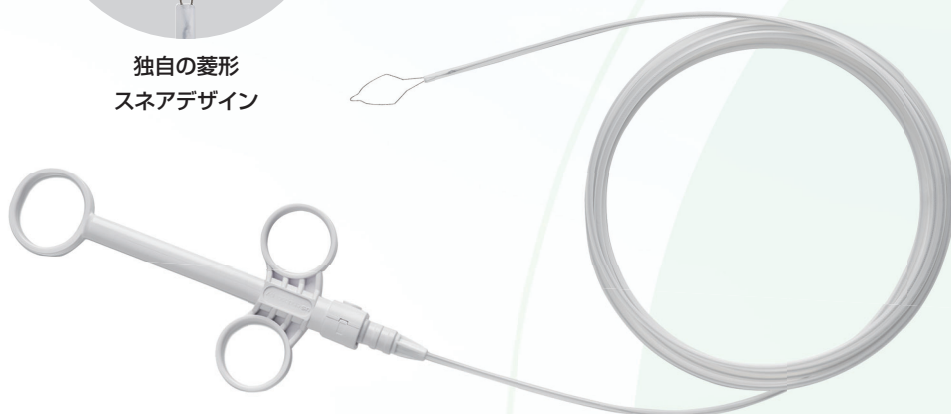


### 小さなポリープのコールドポリペクトミーを Exactにコントロール

- ◆ 7本のマイクロワイヤーで構成される細い撚り線ワイヤーで、よりシャープなポリープ切除
- ◆ コールドポリペクトミー専用に開発、病変への正確なアプローチと組織控滅の少ない切除が可能に
- ◆ シャープな切れ味により、切除後のポリープ飛散を軽減

# イトラップ ポリープ回収用トラップ eTrap® Polyp Trap

看護師の声から生まれた「eTrap」

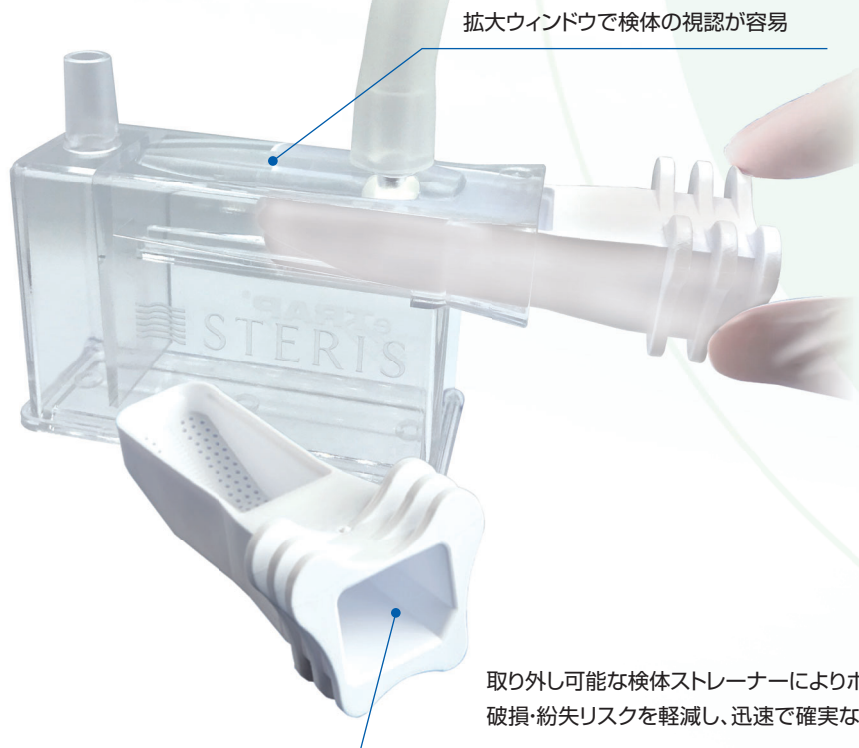

拡大ウィンドウで検体の視認が容易



1セットに2個のトレイ付、吸引したまま差し替え可能  
(差替え時も一定の吸引圧を継続)

取り外し可能な検体ストレーナーによりポリープの  
破損・紛失リスクを軽減し、迅速で確実な検体回収を実現

消化管出血・  
前処置不良例

# コインチップ スネア CoinTip™ Snare




## あらゆるポリープ切除に対応できるハイブリッドデザイン

内視鏡的粘膜切除術(EMR)、ホットスネアポリペクトミー(HSP)、コールドスネアポリペクトミー(CSP)における臨床課題のソリューションへ




### ワイヤー先端を独自の圧縮技術で細径化

- ・ループワイヤーの先端を0.25mmに平坦圧縮
- ・組織断端の挫滅を軽減し、シャープな切れ味を実現

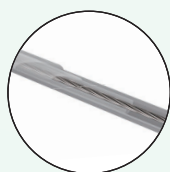


### 二重構造のカテーテル

- ・ポリープ切除時に発生するカテーテルの“たわみ”変形を軽減し、確実なポリープ切除を実現

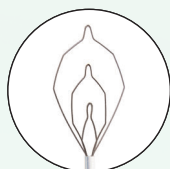

### 三段階のループサイズ

- ・三段階のループ形状で様々なニーズに対応
- ・ワイヤー熱処理加工とメモリーポイント加工を採用することで高いループ形状維持を実現し、様々な形態のポリープに対応

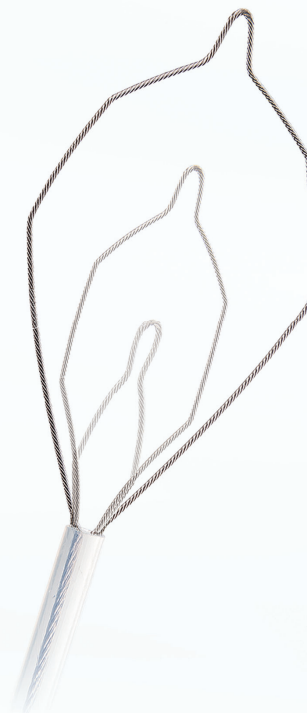

# バイオバック ダイレクトサククションデバイス BioVac® Direct Suction Device



内視鏡および吸引装置に接続する事により、内視鏡吸引ボタン付近に詰まる可能性のある、粘稠度が高い血液や繊維状の血餅、除去しにくい固形物質などを速やかに吸引できるようにするチューブです



鉗子口に装着することにより、高い吸引力を実現し、必要な処置具挿入も可能

### バイオシールド ディスポーザブル鉗子栓



洗浄不要な Disposable 仕様様が 交差感染リスクを低減します。

### バイオシールド イリゲーター




洗浄・減圧、  
にも対応可能な吸引力

処置具を挿入したままでも、素早いフラッシングが可能です。

バイオバック ダイレクトサククションデバイス 動画QRコード

セットアップ 原理

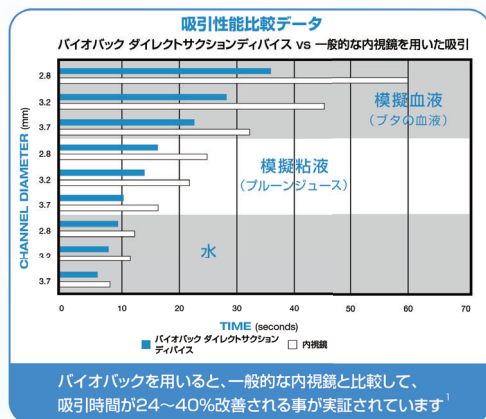

1. STERIS Endoscopy社内データ

## エグザクト コールドスネア

品番	品名	シース外径	有効長	スネアサイズ(幅)	ワイヤー径	包装単位
HZ711115	エグザクトコールドスネア	2.4mm	230cm	9mm	0.30mm	10個/箱

一般的名称:自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 販売名:エグザクト コールドスネア 医療機器届出番号:27B1X00040000196 クラスI

## コインチップ スネア

品番	品名	シース外径	有効長	スネアサイズ (幅×長さ)	ワイヤー径	包装単位
00711110	コインチップスネア	2.5mm	230cm	デルタ型 (20×32mm)	0.41mm 先端部分:0.25mm	10個/箱
				六角形型 (10×27mm)		
				ダイヤモンド型 (6×19mm)		

一般的名称:単回使用電気手術向け内視鏡用スネア 販売名:ディスプレイザブル内視鏡用スネア 医療機器認証番号:228ADBZX00051000 クラスII

## イトラップ ポリープ回収用トラップ

品番	品名	規格	包装単位	備考
HZ711099	イトラップ ポリープ回収用トラップ	回収トレイ2個付き	25個/箱	未滅菌 ディスポーザブル製品

一般的名称:吸引器用キャニスタ 販売名:イトラップ ポリープ回収用トラップ 医療機器届出番号:27B1X00040000188 クラスI

## バイオバック ダイレクトサククションデバイス

品番	品名	規格	包装単位	備考
HZ711513	バイオバック ダイレクトサククションデバイス	サククションチューブ長 244cm イリゲーションチューブ長 61cm	5個/箱	未滅菌 ディスポーザブル製品

一般的名称:送水吸引チューブ 販売名:バイオバック ダイレクトサククションデバイス 医療機器届出番号:27B1X00040000191 クラスI

## バイオシールド

品番	品名	規格	包装単位
HZ711125	バイオシールド(ディスプレイザブル)20個入	未滅菌	10袋/箱
HZ711133	バイオシールド(イリゲーター)	未滅菌・クランプ付き	50個/箱

一般的名称:内視鏡用部品アダプタ 販売名:バイオシールド 医療機器届出番号:27B1X00040000190 クラスI



## 対極板

ユニバーサルタイプ

↑>5kg

品番	品名	規格	包装単位	全体面積	導電部面積
2900-C/12	デュアル対極板 TELIC UNIV	3mコード付	50枚/箱	168cm <sup>2</sup>	105cm <sup>2</sup>
2900-C/12/5		5mコード付			

一般的名称:処置用対極板 販売名:blaycoディスプレイザブル対極板 医療機器認証番号:220ACBZX00095000 クラスII



## 製造販売元

**JSS 株式会社ジェイ エス エス**

<http://www.jssco.co.jp/>

本社:〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F

TEL 06-6222-3751・FAX 06-6222-3750

東京営業所: TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475

大阪営業所: TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756

福岡営業所: TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

ST230125-2403-03-800-15